

Spett.

Spett. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
LOMB./EM.ROM. "B. UBERTINI"

Via Bianchi 9

25124 Brescia (BS)

Il sottoscritto ING. VICTOR VILLANI in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta AIRUM SRL, con la presente, avendo terminato i lavori di FORNITURA E POSA DI ARREDI TECNICI C/O IL LABORATORIO DELLA SEZIONE DI BOLOGNA, Via Fiorini 5, 40127 Bologna (BO), trasmette il

VERBALE DI COLLAUDO FINALE DELLE OPERE REALIZZATE

Il giorno 06 ottobre 2025, alla presenza di Ing. MARTA GASPARINI per ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LOMB./EM.ROM. "B. UBERTINI", il sottoscritto attesta l'ultimazione dei lavori e verifica la funzionalità ed efficienza dell'impianto

A tal fine dichiara:

- ☒ di aver effettuato le verifiche necessarie al funzionamento ottimale dell'impianto;
- ☒ di aver accertato l'assenza di vizi ed il corretto funzionamento delle singole componenti dell'impianto.

Alla luce dei controlli e delle verifiche eseguite, il sottoscritto Collaudatore dichiara che la fornitura e posa degli arredi tecnici e delle cappe chimiche, con relativo collegamento agli impianti di aspirazione, è stata realizzata a regola d'arte e risulta conforme alle normative tecniche e di sicurezza vigenti; pertanto, con il presente atto, ne attesta e certifica il collaudo funzionale e la rispondenza ai requisiti contrattuali e di legge.


Bologna, lì 06/10/25

Accettazione

Per IZSLER

Ing. Marta Gasparini

Per AIRUM SRL

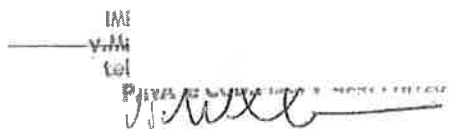

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE INDUSTRIALE. ARREDI TECNICI E CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO

I seguenti controlli sono stati effettuati e i componenti sottoposti con esito positivo al collaudo:

 Cappa chimica Modello: AIRQ DSM-15.00 SS S Matricola: 208K/02/2025/01 Ubicazione: Locale 16 – LAB. MICROTOSSINE	
 Controllo integrità strutturale e corretto montaggio	✓
 Verifica collegamento impianto di aspirazione e scarico in atm	✓
 Avviamento ventilatore e verifica senso di rotazione	✓
 Accensione e spegnimento da pannello di controllo	✓
 Controllo funzionamento sistemi di illuminazione, prese elettriche e dispositivi di sicurezza	✓
 Test allarmi	✓
 Misurazione della velocità frontale con ANEMOMETRO a filo caldo Kanomax mod. 6036 calibrazione strumento certificata Delta OHM maggio 2022	
Valore medio rilevato con saliscendi in posizione 50 cm	0,50..... m/s
Valore medio rilevato con saliscendi chiuso	5,20... m/s
Note 	

 Cappa chimica Modello: AIRQ DSM-15.00 SS S Matricola: 208K/02/2025/02 Ubicazione: Locale 16 – LAB. MICROTOSSINE					
 Controllo integrità strutturale e corretto montaggio	✓				
 Verifica collegamento impianto di aspirazione e scarico in atm	✓				
 Avviamento ventilatore e verifica senso di rotazione	✓				
 Accensione e spegnimento da pannello di controllo	✓				
 Controllo funzionamento sistemi di illuminazione, prese elettriche e dispositivi di sicurezza	✓				
 Test allarmi	✓				
 Misurazione della velocità frontale con ANEMOMETRO a filo caldo Kanomax mod. 6036 calibrazione strumento certificata Delta OHM maggio 2022 <table border="1"> <tr> <td>Valore medio rilevato con saliscendi in posizione 50 cm</td> <td>0,50... m/s</td> </tr> <tr> <td>Valore medio rilevato con saliscendi chiuso</td> <td>4,50... m/s</td> </tr> </table> Note Riavviato sistema elettronico, se dovessero fare nuovamente problemi provvederemo alla sua sostituzione.		Valore medio rilevato con saliscendi in posizione 50 cm	0,50... m/s	Valore medio rilevato con saliscendi chiuso	4,50... m/s
Valore medio rilevato con saliscendi in posizione 50 cm	0,50... m/s				
Valore medio rilevato con saliscendi chiuso	4,50... m/s				

 Cappa chimica Modello: AIRQ DSM-15.00 SS S Matricola: 208K/02/2025/03 Ubicazione: Locale 14 -- LAB. RESIDUI	
 Controllo integrità strutturale e corretto montaggio	✓
 Verifica collegamento impianto di aspirazione e scarico in atm	✓
 Avviamento ventilatore e verifica senso di rotazione	✓
 Accensione e spegnimento da pannello di controllo	✓
 Controllo funzionamento sistemi di illuminazione, prese elettriche e dispositivi di sicurezza	✓
 Test allarmi	✓
 Misurazione della velocità frontale con ANEMOMETRO a filo caldo Kanomax mod. 6036 calibrazione strumento certificata Delta OHM maggio 2022	
Valore medio rilevato con saliscendi in posizione 50 cm	0,58... m/s
Valore medio rilevato con saliscendi chiuso	4,90... m/s
Note 	

 Cappa chimica Modello: AIRQ DSM-15.00 SS S Matricola: 208K/02/2025/04 Ubicazione: Locale 14 – LAB. RESIDUI	
 Controllo integrità strutturale e corretto montaggio	✓
 Verifica collegamento impianto di aspirazione e scarico in atm	✓
 Avviamento ventilatore e verifica senso di rotazione	✓
 Accensione e spegnimento da pannello di controllo	✓
 Controllo funzionamento sistemi di illuminazione, prese elettriche e dispositivi di sicurezza	✓
 Test allarmi	✓
 Misurazione della velocità frontale con ANEMOMETRO a filo caldo Kanomax mod. 6036 calibrazione strumento certificata Delta OHM maggio 2022	
Valore medio rilevato con saliscendi in posizione 50 cm	0,50 m/s
Valore medio rilevato con saliscendi chiuso	1,70 m/s
Note ed eventuali 	

 Arredo tecnico	
 Conformità agli elaborati esecutivi e corretta installazione	✓
 Tenuta ed integrità della struttura	✓
 Verifica prese elettriche	✓
 Aspirazione armadio	✓
 Verifica scarico acqua lavello	✓
Note ed eventuali <i>Ancora da consegnare n. 2 prese industriali</i> 	